


オムツチェッカーで
毎日の介護をサポート。

オムツ
オムツチェッカー **LOOPER**

LOOPERを
動画で見る

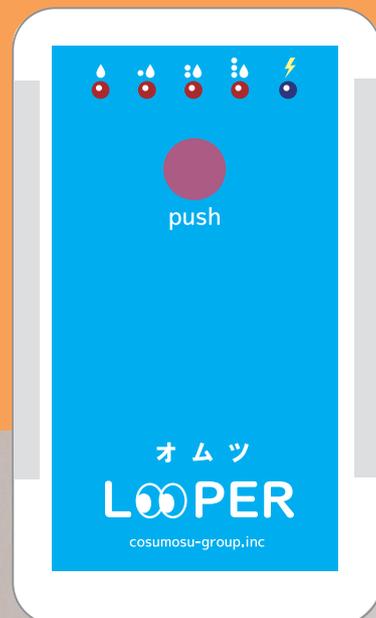

介護職
の方に

在宅での
介護に

なんと洋服の上からでも

オムツの濡れ具合を検知できます！

オムツの濡れ具合を4段階でお知らせ！

※青いランプは電池交換を示すものです。

本製品は、尿とりパッドを使用している方に対応可能です。

介護従事者に大変喜ばれています！

服を脱がして確認をしなくてよいので、オムツ替えがぐんと楽になります！

夜間のオムツ替えが楽になる！

対象者を起こすことなく、オムツの濡れ具合を検知することができるので、
介護従事者、介護対象者、双方の負担が軽減されます。





使い方

●●●●●
**静電容量を測ることで、
 おむつの濡れ・量を検知します。**

※ 静電容量センサーとは…
 人の手などとの間に発生する静電容量の変化から物体を検知する非接触式のセンサーです。


1 片方の手で対象者の手首や腕に触れます

2 もう一方の手で裏面の銀部分を検知したい個所にあてます

3 親指と中指で両側の銀部分をしっかりと触ります

4 pushボタンを押すとオムツの濡れ具合を検知します

対象者のオムツの濡れ部分

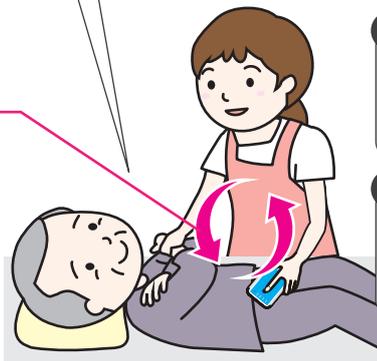

検知結果の見方

※青いランプは電池交換を示すものです。

●ランプが**全て**消灯



オムツは
濡れていない状態

●ランプが**ひとつ**点灯



オムツは
湿った程度の状態

●ランプが**ふたつ**点灯



オムツは
50%程度濡れた状態

●ランプが**みっつ**点灯



オムツは
80%程度濡れた状態

●ランプが**全て**点灯



オムツは
100%程度濡れた状態

商品購入に関するお問い合わせ

有限会社コスモス URL: <https://cosumosu-gr.co.jp>

〒371-0823 群馬県前橋市川曲町 1-1

☎ **027-251-1115** FAX: 027-289-2810
 平日・祝日 9:00-18:00

✉ loopер@cosumosu-gr.co.jp



オムツ
 オムツチェッカー **LOOPER**

品名	オムツ LOOPER
外形寸法 (WxHxDcm)	6.9×11.5×1.95
重量	78g (電池を抜いた状態)
仕様電池	単4電池 2本

価格: オープン価格

